

LE 07/11/2025

NOTE D'INFORMATION
SERVICE IMAGERIE ET GIE SCANNER IRM DU BESSIN

Suite à de nombreuses difficultés et dysfonctionnements concernant la diffusion des résultats des examens d'imagerie ces derniers mois, nous vous informons d'un changement informatique visant à améliorer l'accès aux examens d'imagerie depuis Sillage.


Dorénavant,

Le PACS* du CHAB hébergera les images et les comptes-rendus de la radiologie conventionnelle et de l'échographie du CHAB.

L'accès aux résultats est disponible depuis Sillage par le lien contextuel : **GxD5 - UNIVIEW**

Le PACS* central NORMEDIS hébergera les images et les comptes-rendus du scanner et IRM du GIE scanner IRM du bassin.

L'accès aux résultats est disponible depuis Sillage par le lien contextuel : **GxD5 Scanner IRM**

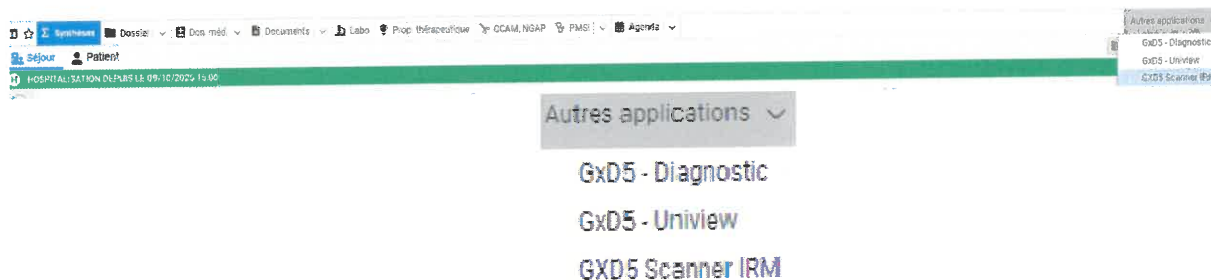

En cas de difficultés ou questions les référents pour chaque entité sont :

CHAB : Dr MARCELLIN-FLAIS Virginie (Cheffe de service imagerie)
LEFRANCOIS Vincent (coordinateur CHAB)

GIE SCANNER IRM DU BESSIN :
Dr PESCHARD Léo (Radiologie NORMEDIS et référent informatique)
BOINET Julien (manipulateur et référent informatique GIE)

PACS : système de gestion électronique des images Médicales


Nous conservons en doublon la procédure d'accès aux résultats et de transferts d'examens effectués au GIE Scanner IRM actuellement utilisée.

PROCEDURE CONNEXION ACCES IMAGERIE MEDICALE CHAB / NORMEDIS RADIOLOGIE

- Se connecter au site :

<https://pacs.normedisradiologie.fr/login.php>

- Sur cette interface, entrer ses id et mot de passe, puis cliquer sur connexion

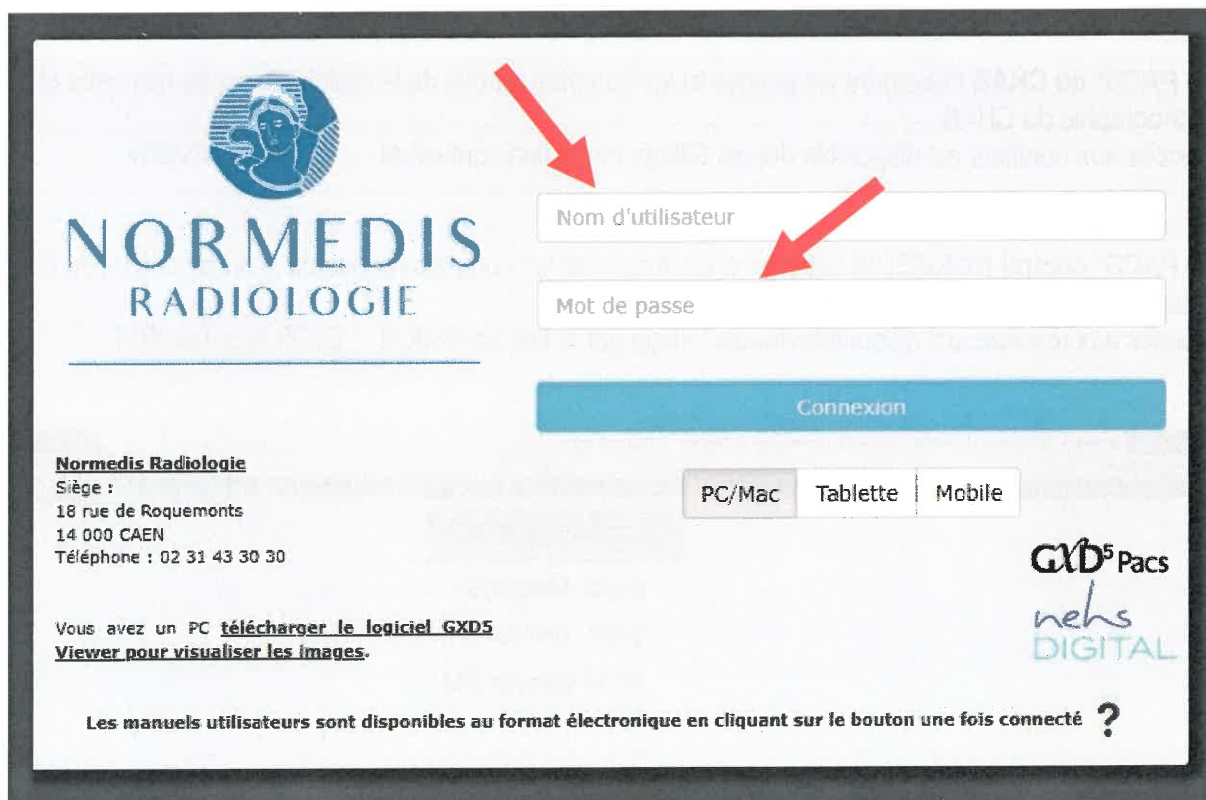

The screenshot shows the login page for Normedis Radiologie. On the left is the logo and contact information. On the right are input fields for 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', with red arrows pointing to them. Below these is a blue 'Connexion' button. At the bottom right are links for 'PC/Mac', 'Tablette', and 'Mobile'. The footer contains information about GXD5 software and user manuals.

NORMEDIS
RADIOLOGIE

Normedis Radiologie
Siège :
18 rue de Roquemonts
14 000 CAEN
Téléphone : 02 31 43 30 30

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Connexion


PC/Mac | Tablette | Mobile

GXD⁵ Pacs
nehs
DIGITAL

Vous avez un PC [télécharger le logiciel GXD5](#)
[Viewer pour visualiser les images.](#)

Les manuels utilisateurs sont disponibles au format électronique en cliquant sur le bouton une fois connecté ?

- Sur cette interface, **RESTER++** sur l'onglet « Examen »

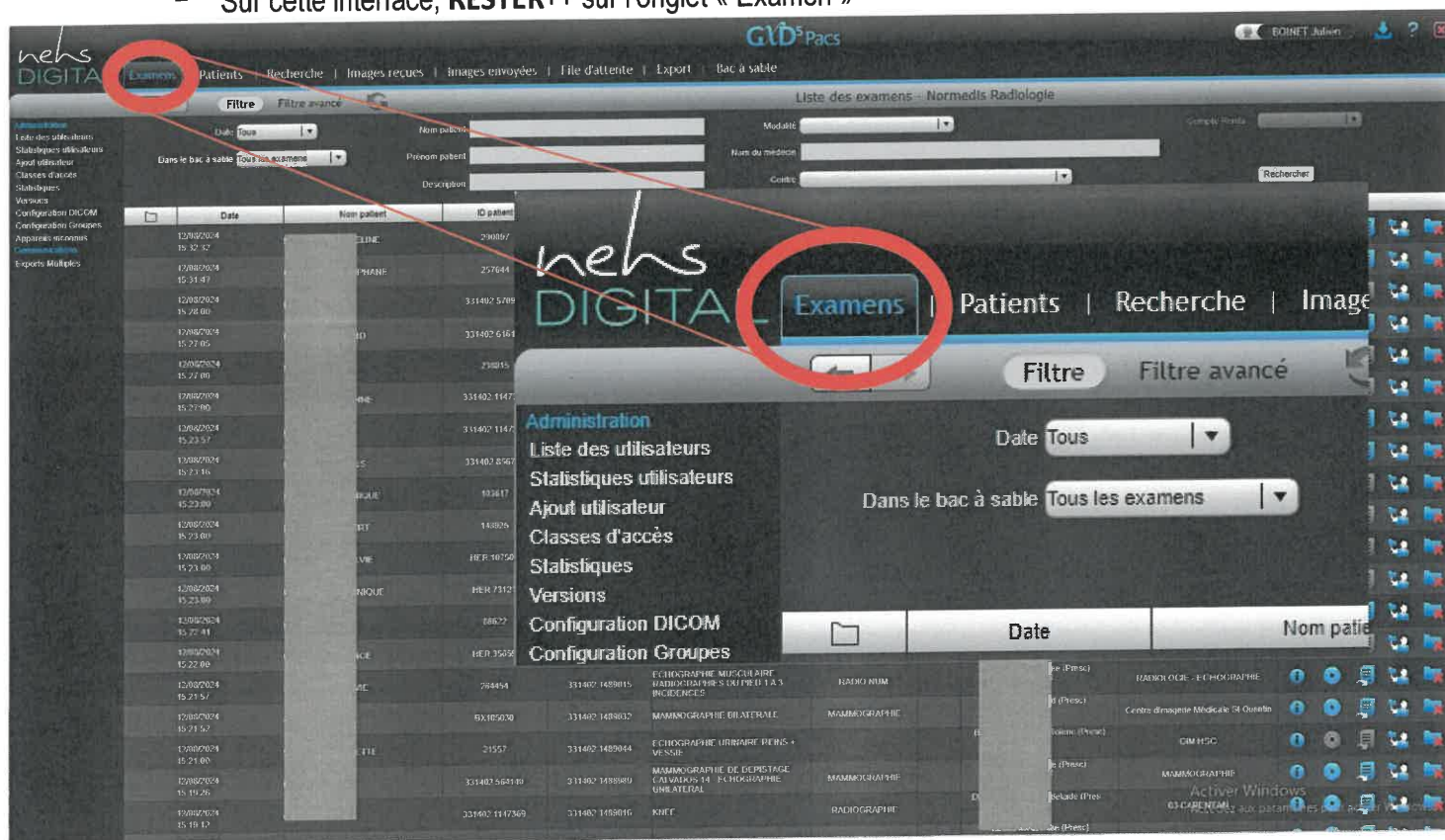


- Chercher le patient concerné
- Faire un simple clic sur le nom du patient. Cette action aura pour effet d'ouvrir les séries d'images de l'examen.
- Faire un double-clic sur une des séries pour accéder à la visualisation des images.
- Si nécessité d'export d'images, sélectionner **uniquement** l'examen de la date concernée et cliqué sur « exporter »



- Ce pop-up apparaît. Sélectionner :
COVO_CH_CAEN pour un envoi au CHU
COVO_BACLESSE pour un envoi au CFB

Puis cliquer sur transférer.

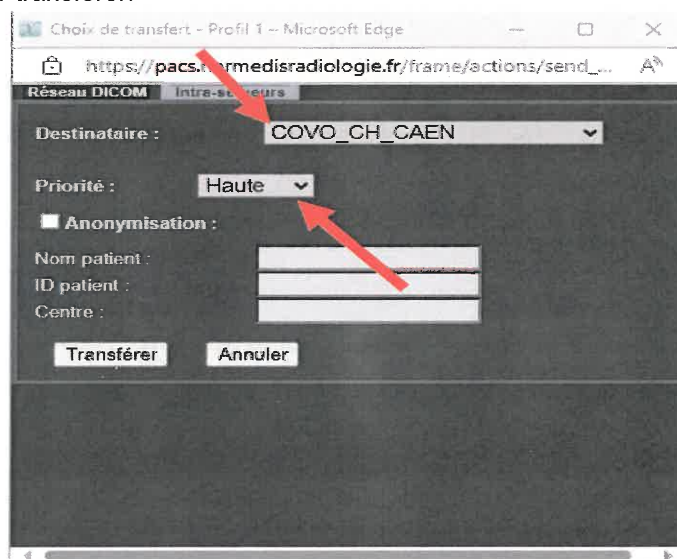

ATTENTION un envoi = un examen. Si plusieurs examens envoyés simultanément
→ BLOCAGE complet du serveur COVOLINK.

